

Die Alinea-App: Kurzer Benutzerleitfaden




Einleitung

Willkommen in der Welt des schnellen, effizienten Texterkennungssystems der Alinea-App. Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen, die Bedienung der App auf Ihrem iOS-Gerät zu erlernen.

Die Alinea-App: Was ?

Die Alinea-App ist eine schnelle und effiziente App für Ihr iOS- Gerät, die Texte in 33 Sprachen erkennen und laut vorlesen kann. Die Benutzeroberfläche ist in 14 Sprachen verfügbar.

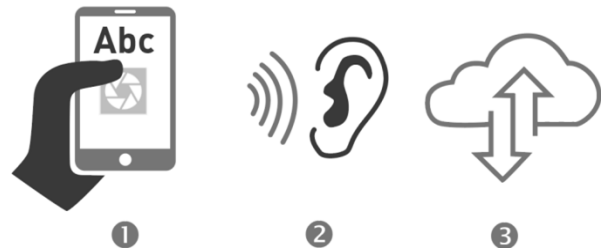

1. Die App liest Text vor, der entweder von einem Textdokument stammt oder aus einem Bild extrahiert wurde. Der Text kann als PDF, PNG, JPEG oder EPUB importiert oder durch ein Kamerabild zur Verfügung gestellt werden, das in Text umgewandelt wird.
2. Die App ermöglicht einseitige oder mehrseitige Verwendung mit dem schnellen Kamera- aufnahmeprozess für mehrseitige Erkennung.
3. Bei der Entwicklung der App hatten die Produktivität der Anwender und die Benutzerfreundlichkeit höchste Priorität, was zu anpassbaren Bedienelementen und Einstellungen führte. An späterer Stelle in diesem Leitfaden erfahren Sie mehr darüber.
4. Lesen und hören Sie eine Vielzahl an Dokumenten und Formaten, wie beispielsweise PDF, PNG, JPEG, EPUB und Textformat.
5. Wichtige Funktionen: Ausschneiden, Drehen und Bearbeiten von Fotos vor der Texterkennung, Anzeige von Standarddokumenten im PDF-Präsentationsmodus mit Doppelmarkierung beim Lesen, Verwenden von PDF-Dokumenten mit Lesereihenfolge, Verwenden von PDF-Dokumenten mit Sprachbezeichnungen, Hinzufügen und Entfernen von Lesezeichen, Wechseln zwischen der PDF-Ansicht und der Textansicht (ohne Formatierung). Zu Ihrer Information: Der Text beschreibt ein Dokument im Textformat als KNFB-Dokument.
6. Die App ist mit dem Bildschirmleseprogramm VoiceOver von iOS für Sehbehinderte kompatibel. Die Einstellungen für Benutzer des VoiceOver-Bildschirmlesers werden verwendet, wenn VoiceOver aktiv ist, wenn Sie die Alinea-App zum ersten Mal starten. Wenn beim ersten Öffnen des Alineas VoiceOver aus irgendeinem Grund aktiviert ist, Sie jedoch die Standardeinstellungen für Nichtbenutzer der VoiceOver-Funktion verwenden möchten, dann können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen wählen, indem Sie auf „Standardeinstellungen für alle anderen Benutzer anwenden“ tippen. Diese Einstellung bietet Zugriff auf eine Reihe zusätzlicher Funktionen, einschließlich der Unterstützung beim Aufnehmen von Fotos und Braille. Wenn VoiceOver auf Ihrem Gerät nicht aktiv ist, wird die Alinea-App mit den Standardeinstellungen gestartet, die für alle Personen die visuell arbeiten, geeignet sind.

Was kann die Alinea-App für Sie tun?

- 1. Personen mit Leseschwächen, wie beispielsweise Legasthenie, oder Lerner einer Fremdsprache werden von der App beim Lesen unterstützt.**
 - a. Standardeinstellungen mit maximaler Ansicht und selbsterklärenden Tasten.
 - b. Aktive Unterstützung beim Hören und Vorlesen durch gleichzeitiges Hervorheben des gerade gelesenen Satzes und Wortes.
- 2. Beschäftigten Berufstätigen hilft diese App, Zeit zu sparen, und ermöglicht es, produktiver zu arbeiten.**
 - a. Möglichkeit, große Dokumente zu importieren oder einen mehrseitigen Bericht schnell zu „scannen“.
 - b. Aktivieren des Hintergrundlesens beim Verwenden der App, wenn Ihr Gerät gesperrt ist.

Was ist neu in dieser Version der Alinea-App?

1. Die App hat ein neues Erscheinungsbild. Bei ihrem Design stehen die Produktivität der Anwender und die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund.
2. Diese Version bringt große Veränderungen für das Lesen von Dokumenten mit sich.
 - a. Die geläufige PDF Ansicht für erkannten Text ist immer noch zu jeder Zeit verfügbar.
 - b. Lesen jedes Dokuments im Textformat. In diesem Format können Sie die Schriftart ändern und den Text fortlaufend lesen.
 - c. Lesen Ihrer Bücher, die in dem immer beliebter werdenden EPUB-Format veröffentlicht wurden.
3. Zugriff und Speichern Ihrer Dokumente in der Cloud.
 - a. Durchsuchen und Lesen von Dokumenten des Cloud-Dienstes Ihrer Wahl über das Datei-Register.
 - b. Alinea unterstützt nun OneDrive, GoogleDrive und DropBox.
 - c. Verschachtelte Ordner können für verwandte Dokumente verwendet werden.
4. Die App verfügt nun über eine aktive Elementerkennung zum Tätigen von Anrufen, Senden von E-Mails oder zum Öffnen von Hyperlinks.
5. Zusätzlich zum Hochformat unterstützt die App nun auch Querformat.



Einige Tipps und Tricks, damit Sie Fotos aufnehmen können, die für die Alinea-App geeignet sind

1. Nehmen Sie Bilder mit den Tasten Bildaufnahme oder Kamera auf.
2. Positionieren Sie das saubere und unbehinderte Objektiv Ihrer Kamera, welches sich bei den meisten Geräten in der oberen rechten Ecke befindet, in einer Entfernung von 27-32 cm zentral über ein flach ausgebreitetes Dokument.
3. Halten Sie Ihr Gerät parallel zu Ihrem Blatt.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Schreibtisch frei ist (z. B. entfernen Sie Schreibmaterial).

Nach dieser kurzen Einführung geben wir Ihnen jetzt einen detaillierten Überblick über die Funktionen der Alinea-App.


Die Alinea-App verfügt über 5 Registerkarten am unteren Bildschirmrand: **Kamera** (S. 3) - **Lesen** (S. 8) - **Dateien** (S. 13) - **Einstellungen** (S. 16) und **Hilfe** (S. 23). In jeder Registerkarte werden ähnliche Funktionen gesammelt. Unten finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Bildschirme. Die Registerkarten sind auch in logischer Reihenfolge verwendet, d.h. Sie beginnen mit der Aufnahme eines Fotos und wechseln dann zum Auslesen. Sie benötigen gelegentlich die Registerkarten "Dateien", "Einstellungen" und "Hilfe", insbesondere wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden.

1. Die erste Registerkarte ist das KAMERA-Register. Ihr Alinea öffnet sich in diesem Register; es ist der Startbildschirm der App.

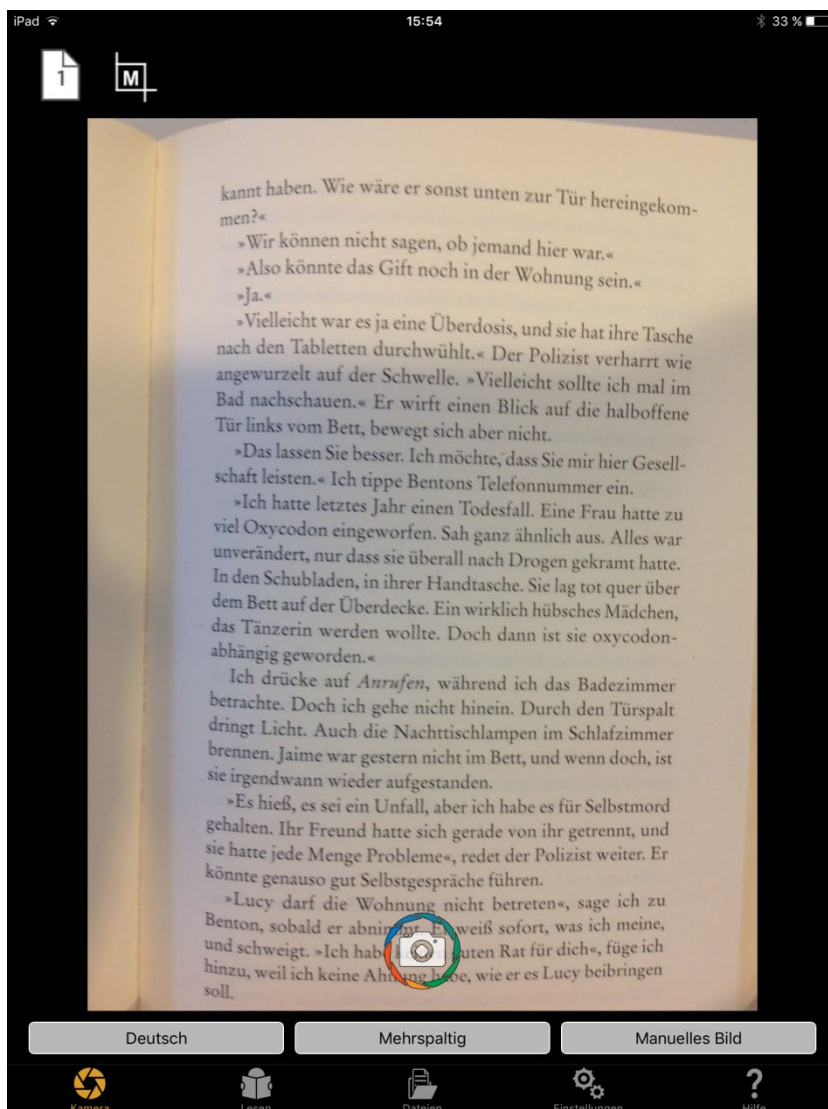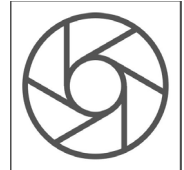

Im Dokumentfenster finden Sie:

Kamera-Register: Taste für die Bildaufnahme.

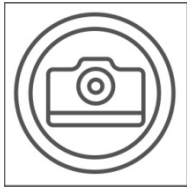

Nehmen Sie mit der Kamera Ihres Geräts ein Bild auf.

Nehmen Sie ein Bild mit eingeschalteter Mehrseitenmodus: Fügen Sie der Warteschlange ein weiteres Bild hinzu; der Zählindikator erhöht sich.

Nehmen Sie ein Bild mit ausgeschalteter Mehrseitenfunktion: Beachten Sie die optionalen Zuschneide- und Erkennungsphasen, bevor Sie für die Anzeige zum Lese-Register wechseln.

Über dem Dokumentfenster finden Sie:


Kamera-Register: Blitztaste (nur verfügbar, wenn Ihr Gerät einen Blitz hat / nicht für iPad).



Die Blitztaste ermöglicht es Ihnen, auf Ihrem Gerät zwischen den Einstellungen ständig eingeschaltetem Blitz, automatischem Blitz nach Bedarf oder keinem Blitz auszuwählen. Diese Option ist auf einem iPad nicht verfügbar, da auf einem iPad kein Flash vorhanden ist.




Kamera-Register: Taste zum Ein- und Ausschalten des Mehrseitenmodus.

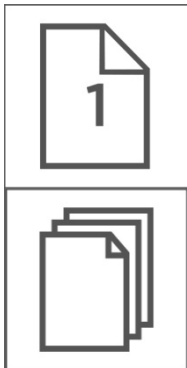

Aktivieren Sie den Mehrseitenmodus über EIN. Nach dem Aufnehmen eines Bildes erscheinen mehr Bedienelemente:

- Die Seitenzählung.
- Entfernen des zuletzt aufgenommenen Bildes.
- Taste zum Löschen der Mehrseitenmodus und Entfernen aller Bilder.
- Erkennung starten.

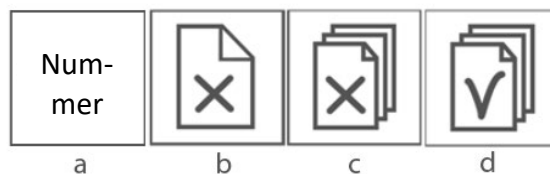

Kamera-Register: Taste zum Aktivieren und Deaktivieren der Texterkennung.




Wenn die Taste zur Texterkennung auf EIN steht, erkennt die Alinea-App Text. EIN ist standardmäßig eingestellt.





AUS wird verwendet, wenn Sie ein Bild-PDF ohne Texterkennung aufnehmen möchten.

Kamera-Register: Taste zum Zuschneiden und Drehen des Bildes und zum Zulassen der Bearbeitung.

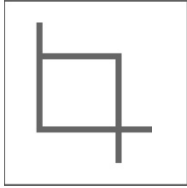

Diese Taste ermöglicht es Ihnen, Teile eines Bildes, z.B. ungewollte Hintergrundelemente, zu entfernen. Ist sie auf AUS gestellt, kann nicht zugeschnitten werden. Ist sie auf AUTOMATISCH gestellt, schneidet und dreht die App das Bild automatisch. Ist sie auf MANUELL gestellt, können Sie manuell zuschneiden und drehen sowie bearbeiten. Bearbeiten bedeutet, dass Sie Teile bestimmen können, die von der Erkennung ausgenommen sein sollen. Achtung: Die Optionen zum Zuschneiden werden nur angezeigt, wenn in den Kameraeinstellungen (Registerkarte "Einstellungen") Zuschneiden aktiviert ist.

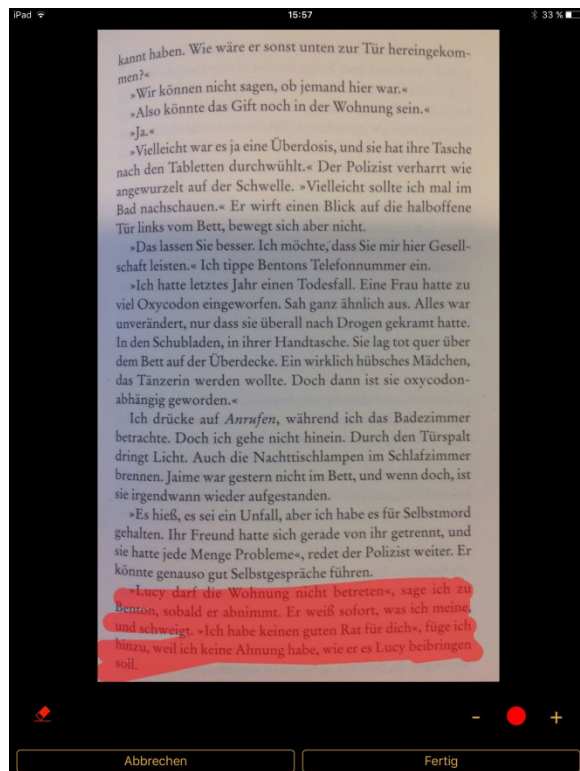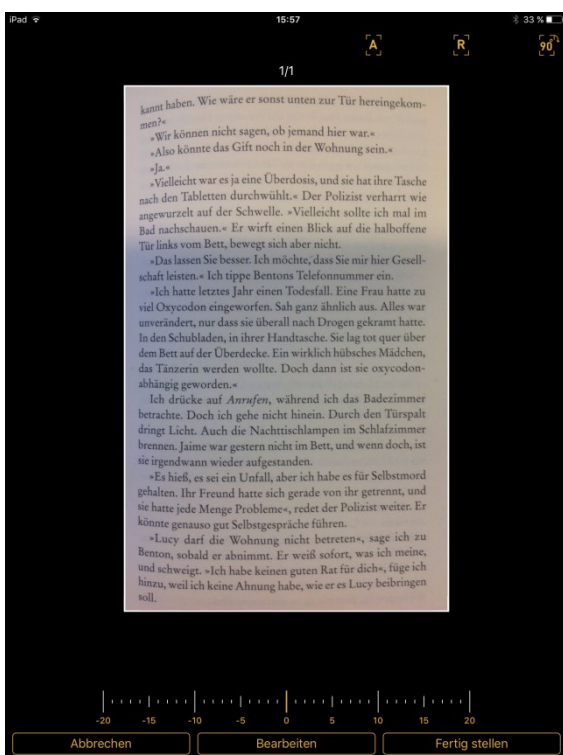

Nach dem Aufnehmen eines Fotos und mit aktivierter Option "Zuschneiden" öffnen sich folgende Optionen:




Automatisch

Zurück

Um 90° Drehen (wenn das Bild nicht richtig aufgenommen wurde)

Sie ziehen das weiße Feld über das Bild, bis Sie das gewünschte Bild haben. Sie können Ihr Bild nach links oder rechts neigen, indem Sie Ihren Finger über die Gradleiste unten links oder rechts bewegen.


Über Bearbeiten können Sie mit dem Radierer bestimmte Textteile "löschen", damit sie nicht erkannt werden. Dazu muss der Radierer rot gefärbt sein.

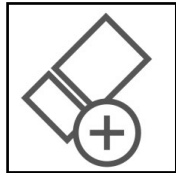

Mit dem weißen Radierer können Sie möglicherweise zu viel gelöschten Text abrufen. Sie können Ihre Änderungen auch abbrechen oder abschließen.

Die Größe der Radierer stellen Sie mit den Tasten + und - ein.

Nur wenn VoiceOver aktiv ist, sind zusätzliche Zuschnittsymbole verfügbar:

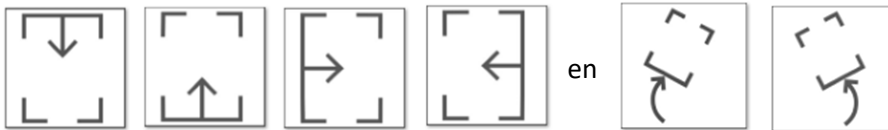


Beschneiden von oben, von unten, von links oder rechts, Bild nach rechts und links neigen

Kamera-Register: Taste zur Tilt-Kontrolle (nur für iPhone verfügbar)



Wenn die Tilt-Kontrolle eingeschaltet ist, vibriert das Gerät, wenn es nicht horizontal ausgerichtet ist. Die Vibration erhöht oder verringert sich je nach Neigungswinkel. Die Vibration stoppt, wenn der Winkel passt, und das Bild aufgenommen werden kann.

Kamera-Register: Taste für den Sichtfeld-Bericht (nur wenn VoiceOver aktiv ist)

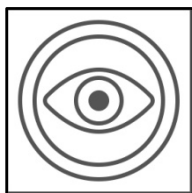

Verwenden Sie die Taste für den Sichtfeld-Bericht für Hilfe beim Positionieren der Kamera über dem Dokument. Sehen Sie dazu auch die Taste Bild aufnehmen.

Zurück in der Hauptregisterkarte Kamera finden Sie über den 5 Registerkarten am unteren Bildschirmrand 3 Schaltflächen:

Kamera-Register: Taste für die Texterkennungssprache

Deutsch

Über die Sprachtaste gelangen Sie zu einer Liste an benutzerdefinierten Sprachen, die erkannt werden können. Wählen Sie aus, welche Sie zur Erkennung verwenden möchten. Die Listenanzeige wird von der Option „Sprachen für die Erkennung auswählen“ im Einstellungsregister bestimmt.

Kamera-Register: EIN- oder AUS-Taste des Mehrspaltenmodus

Einspaltig

Mehrspaltig

Im Mehrspaltenmodus ist die mehrspaltige Erkennung aktiviert, ideal für das Lesen von Zeitungen oder Zeitschriften. Im Einspaltenmodus ist die Spaltenerkennung deaktiviert.

Kamera-Register: Bildmodus-Taste

Manuelles Bild

Automatisches Bild


Bild vom Stand

Bilder können auf 3 Arten aufgenommen werden:

1. **Manuelles Bild:** Die Bildaufnahme-Taste ist aktiviert.
2. **Automatisches Bild:** Wenn der Text passend fokussiert ist, nimmt das Gerät das Bild automatisch auf.
3. **Bild vom Stand:** Das Bild wird aufgenommen, sobald Sie das Textdokument unter den Scanstand legen. Zusammen mit eingeschaltetem Mehrseitenmodus können Sie ganz einfach viele Seiten nacheinander aufnehmen, indem Sie immer wieder ein Dokument unter den Scanstand legen oder die Seiten eines Buches oder einer Zeitschrift umdrehen.

2. Die zweite der 5 Hauptregisterkarten ist das LESE-Register. Der erkannte Text wird im Lese-Register angezeigt.

Standardmäßig wird der Text sofort laut vorgelesen, während die Zeile und das gesprochene Wort hervorgehoben werden. Sie möchten nicht, dass Alinea sofort anfängt zu lesen? Personalisierungen sind im Einstellungsregister möglich.

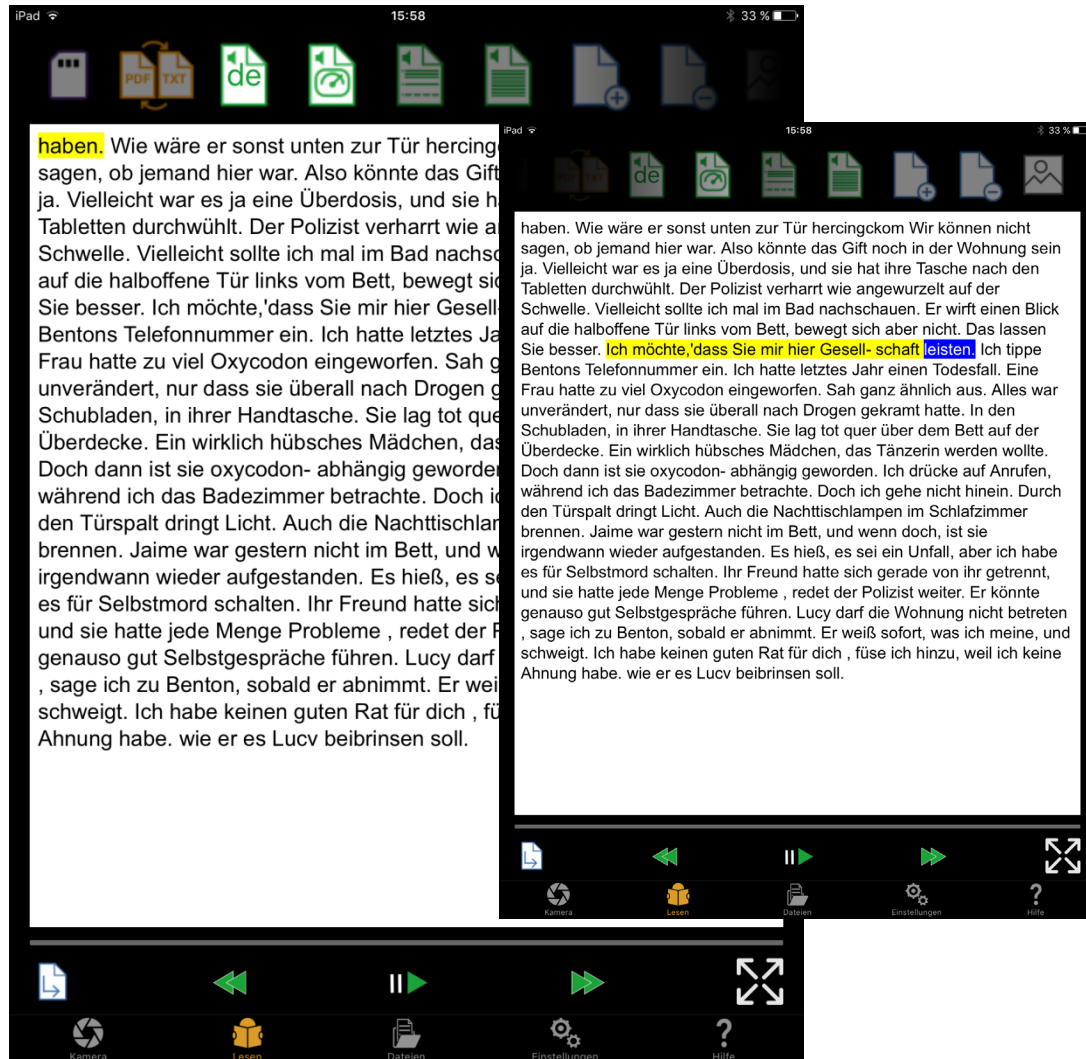


Über dem Dokumentfenster finden Sie die unten beschriebenen Schaltflächen. Sie sind nicht alle sichtbar. Die am weitesten rechts liegende Schaltfläche können Sie auf dem Bildschirm sehen, indem Sie wischen.

Lese-Register: Speichertaste



Die App speichert gescannte Dokumente nur dann, wenn Sie auf „Speichern“ tippen. Der Standardname enthält Datum und Uhrzeit. Der Name kann nach Wunsch angepasst und in einem bestehenden oder neuen Ordner gespeichert werden. Sie können ebenfalls auswählen, in welchem Format das Dokument gespeichert werden soll: Textformat oder PDF. Wenn Sie in der Text-Ansicht sind und in der PDF-Ansicht speichern möchten, dann braucht das Speichern etwas länger. Wenn Sie Ihre Alinea-App mit Ihrem bevorzugten Cloud-Service verbunden haben, dann können Sie ebenfalls auswählen, ob Sie in dem lokalen Ordner oder Ihrem bevorzugten Cloud-Service speichern möchten.

Lese-Register: Taste zum Umschalten der Ansicht

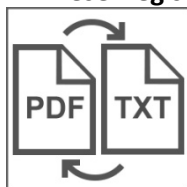

Diese Taste ermöglicht es Ihnen, zwischen der Bildansicht PDF und der einfachen Textansicht TXT zu wechseln.

Lese-Register: Lesesprache-Taste



Die Lesesprache-Taste ermöglicht es Ihnen, die Sprache der Lesestimme zu ändern. Dies ist nicht zu verwechseln mit der Änderung der Erkennungssprache. Fügen Sie Sprachen aus diesem Picker hinzu oder entfernen Sie sie über die Taste zum Auswählen der Lesesprache unter Reader-Einstellungen im Einstellungsregister.

Lese-Register: Geschwindigkeitstaste



Die Geschwindigkeitstaste ermöglicht es Ihnen, die Lesegeschwindigkeit nach Ihrem Wunsch einzustellen.

Lese-Register: Leseinheit-Taste



Wählen Sie je nach Vorliebe zwischen Lesen nach Wort, Satz, Zeile oder Absatz. Verwenden Sie dies in Kombination mit den Tasten am unteren Ende ‚vorherig‘ oder ‚nachfolgend‘, um zur vorherigen oder nachfolgenden Wort-, Zeilen-, oder Satzeinheit zu wechseln.

Lese-Register: Taste zum kontinuierlichen/selbstbestimmten Lesen



Wählen Sie zwischen dem kontinuierlichen oder selbstbestimmten Modus. Die Leseinheit wird von der Leseinheit-Taste bestimmt.

Die erste Taste ist für den kontinuierlichen Lesemodus.




Die zweite Taste ist für den selbstbestimmten Lesemodus. Im selbstbestimmten Modus stoppt das Lesen nach jeder Leseinheit.

Lese-Register: Taste zum Hinzufügen einer Seite




Diese Taste zum Hinzufügen einer Seite ermöglicht es Ihnen, einem Dokument nach dem Speichern eine Seite hinzuzufügen. Aktivieren Sie das Kamera-Register, um das neue Bild aufzunehmen, das am Ende Ihres Dokuments hinzugefügt wird.

Lese-Register: Taste zum Entfernen einer Seite

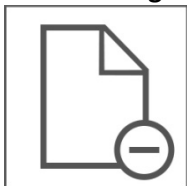

Die Taste zum Entfernen einer Seite ermöglicht es Ihnen, die letzte Seite eines Dokuments zu entfernen.

Lese-Register: Taste zum Hinzufügen eines Lesezeichens

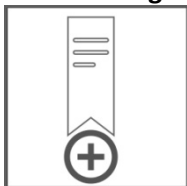


Die Taste zum Hinzufügen eines Lesezeichens ermöglicht es Ihnen, ein Lesezeichen hinzuzufügen.

Lese-Register: Taste zum Anzeigen der Lesezeichen



Mit der Taste zum Anzeigen der Lesezeichen können Sie alle Lesezeichen anzeigen. Tippen Sie auf ein Lesezeichen, um zu dieser Position im Dokument zu springen. Tippen Sie auf Bearbeiten, wenn Sie ein Lesezeichen neu benennen oder löschen möchten.


Lese-Register: Taste zum Anzeigen der Zonen

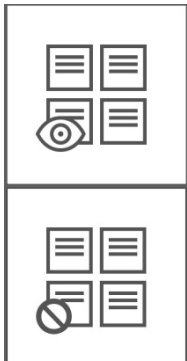

Verwenden Sie diese Taste zum Anzeigen der Lesezonen und zum Überprüfen der Lesereihenfolge in einem zur Zugänglichkeit markierten PDF-Dokument. Die Lesereihenfolge kann nicht angepasst werden.

Mit der zweiten Taste werden die Lesezonen verborgen.

Lese-Register: Taste zum Anzeigen der Sprachmarkierung

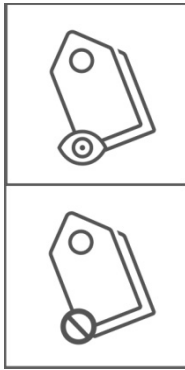

Verwenden Sie diese Taste, um die Sprachmarkierung in einem sprachmarkierten Dokument zu überprüfen. Es ist nicht möglich, Sprachmarkierungen selbst hinzuzufügen oder zu entfernen.

Mit der ersten Taste wird die Sprachmarkierung aktiviert.

Mit der zweiten Taste wird die Sprachmarkierung deaktiviert.

Lese-Register: Taste zum Anzeigen von Bildern (nur im Text-Format verfügbar)



Anzeige des ursprünglich aufgenommenen Bildes. Über ZURÜCK kommen Sie wieder zum Lese-Register.

Lese-Register: Taste zum Wiederholen der Erkennung



Wiederholen Sie die Erkennung des Dokuments in einer anderen Erkennungssprache oder einem anderen Spaltenmodus.

Unten im Dokumentfenster finden Sie folgende Schaltflächen:

Lese-Register: Gehe-zu-Seite-Schieberegler (Nur sichtbar bei einem Dokument mit mehreren Seiten)



Bewegen Sie diesen Schieberegler, um zu einer bestimmten Seite zu springen.

Lese-Register: Gehe-zu-Seite-Taste (in den Formaten Text und PDF, nicht im EPUB-Format)



Diese Taste ermöglicht es Ihnen, durch die Eingabe einer Seitenzahl zu einer ausgewählten Seite innerhalb Ihres Dokuments zu springen.

Lese-Register: Rückwärts-Taste



Wechseln Sie zu der vorherigen Leseinheit.

Lese-Register: Wiedergabe- und Pausentaste




Starten oder pausieren.

Lese-Register: Weiter-Taste



Wechseln Sie zu der nächsten Leseinheit.


Lese-Register: Vollbild-Taste

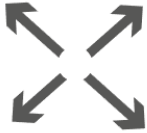

Wählen Sie Vollbild, um alle Bedienelemente, außer den Wiedergabe- und Pausentasten und den Navigationselementen am unteren Ende, zu entfernen. Wählen Sie dies erneut, um zum normalen Lesemodus zurückzukehren.

3. Die dritte der 5 Hauptregisterkarten ist das DATEI-Register. Mit diesem Register haben Sie Zugriff auf Ihre Dokumentverwaltung.

Greifen Sie auf die Dokumentverwaltung all Ihrer lokal, auf der Kamerarolle Ihres Geräts oder in der Cloud gespeicherten oder importierten Dokumente zu.

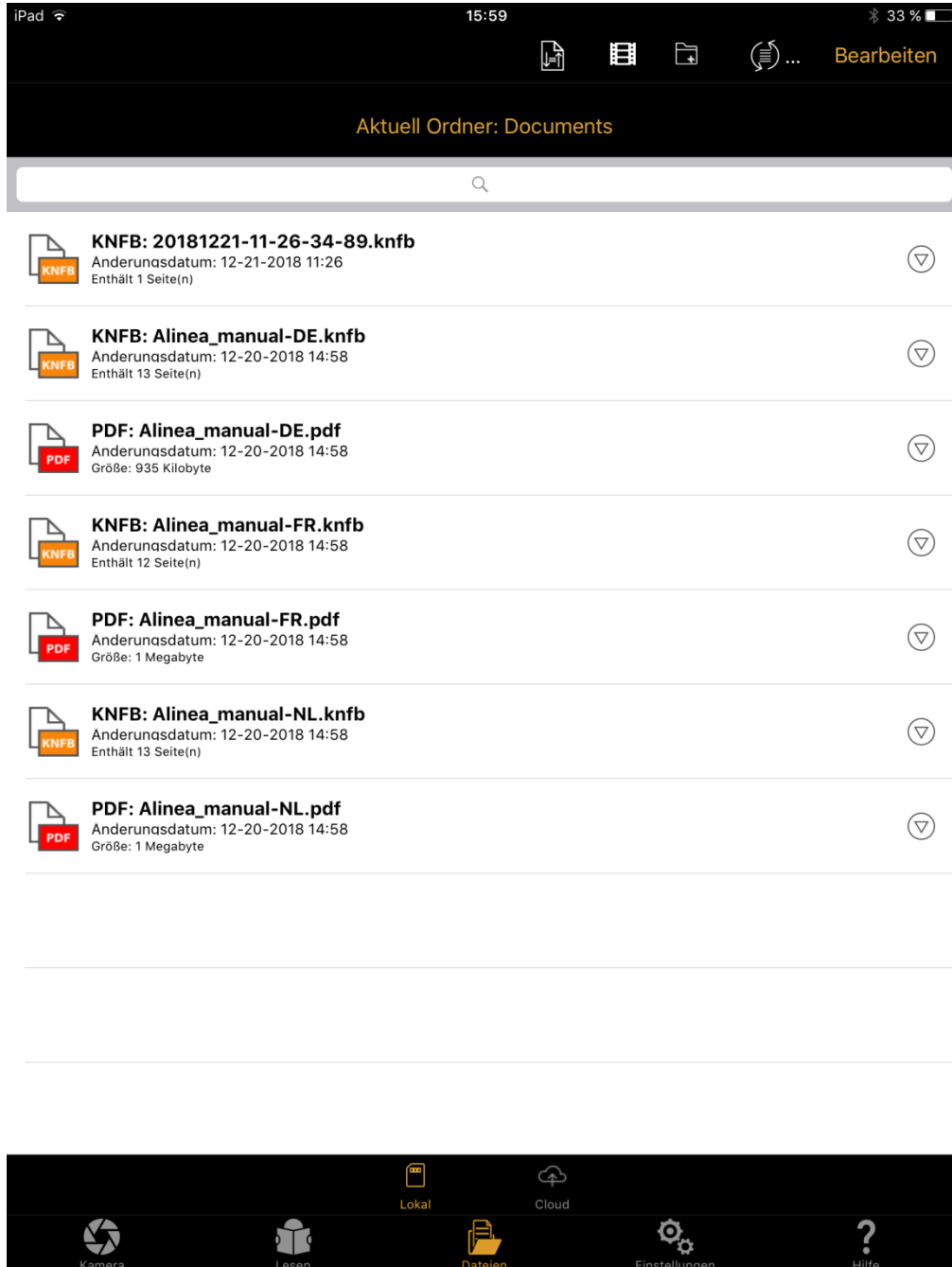


Oben rechts auf dem Bildschirm finden Sie die folgenden Schaltflächen:

Datei-Register: Taste zum Sortieren Ihrer Dateien und Ordner



Mit der Taste Sortieren können Sie Dateien und Ordner sortieren (Name, Änderungsdatum, Typ, Größe)

Datei-Register: Taste zum Importieren von der Kamerarolle

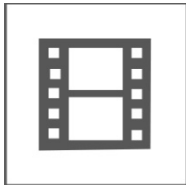

Mit der Taste zum Importieren von der Kamerarolle können Sie Bilder von der Kamerarolle für die Erkennung auswählen.

Datei-Register: Taste zum Hinzufügen eines Ordners



Die Taste zum Hinzufügen eines Ordners ermöglicht es Ihnen, einen neuen Ordner in dem lokalen Ordnerbaum hinzuzufügen.


Datei-Register: Taste zum Aktualisieren der Dateiliste



Sie können Ihre Dateiliste mit der Schaltfläche Aktualisieren aktualisieren. Dies ist die gleiche Funktion wie das Wischen auf Ihrem iPhone oder iPad.

Datei-Register: Bearbeiten-Taste

Mit der Bearbeiten-Taste haben Sie Zugriff auf zusätzliche Tasten, über die Sie ausgewählte Dokumente und Ordner neu benennen, verschieben, teilen und löschen können.

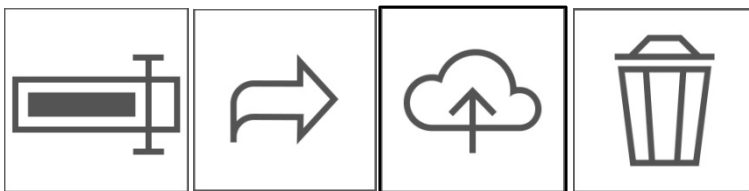

Neu benennen

Verschieben

Teilen

Löschen

Teilen ermöglicht das Teilen von Textdateien.

Nach der Umwandlung über die Taste Teilen erscheint die standardmäßige Teilen-Seite von iOS, mit der Sie die exportierte Datei an verschiedene Dienste und Apps senden können. Teilen ermöglicht es Ihnen, PDF- und ePUB-Dateien in ihrem Originalformat zu teilen.

Unten auf dem Bildschirm finden Sie die folgenden Schaltflächen:

Datei-Register: Lokaltaste



Mit der Lokaltaste werden alle beim Verwenden Ihrer Alinea-App zugänglichen Dokumente und Ordner aufgelistet.

Datei-Register: Cloud-Taste




Mit der Cloud-Taste werden alle in Ihren Cloud-Diensten zugänglichen Dokumente und Ordner aufgelistet. Google Drive, OneDrive und Dropbox werden unterstützt.

4. Die vierte der 5 Hauptregisterkarten ist das EINSTELLUNGS-Register. Über dieses Register können Sie das Verhalten Ihrer Alinea-App steuern.



Im Einstellungsregister können Sie das Verhalten Ihrer Alinea-App steuern. Hier finden Sie Optionen, mit denen Sie einstellen können, wie Dokumente angezeigt und vorgelesen werden. Auch das Erscheinungsbild der App selbst kann geändert werden.

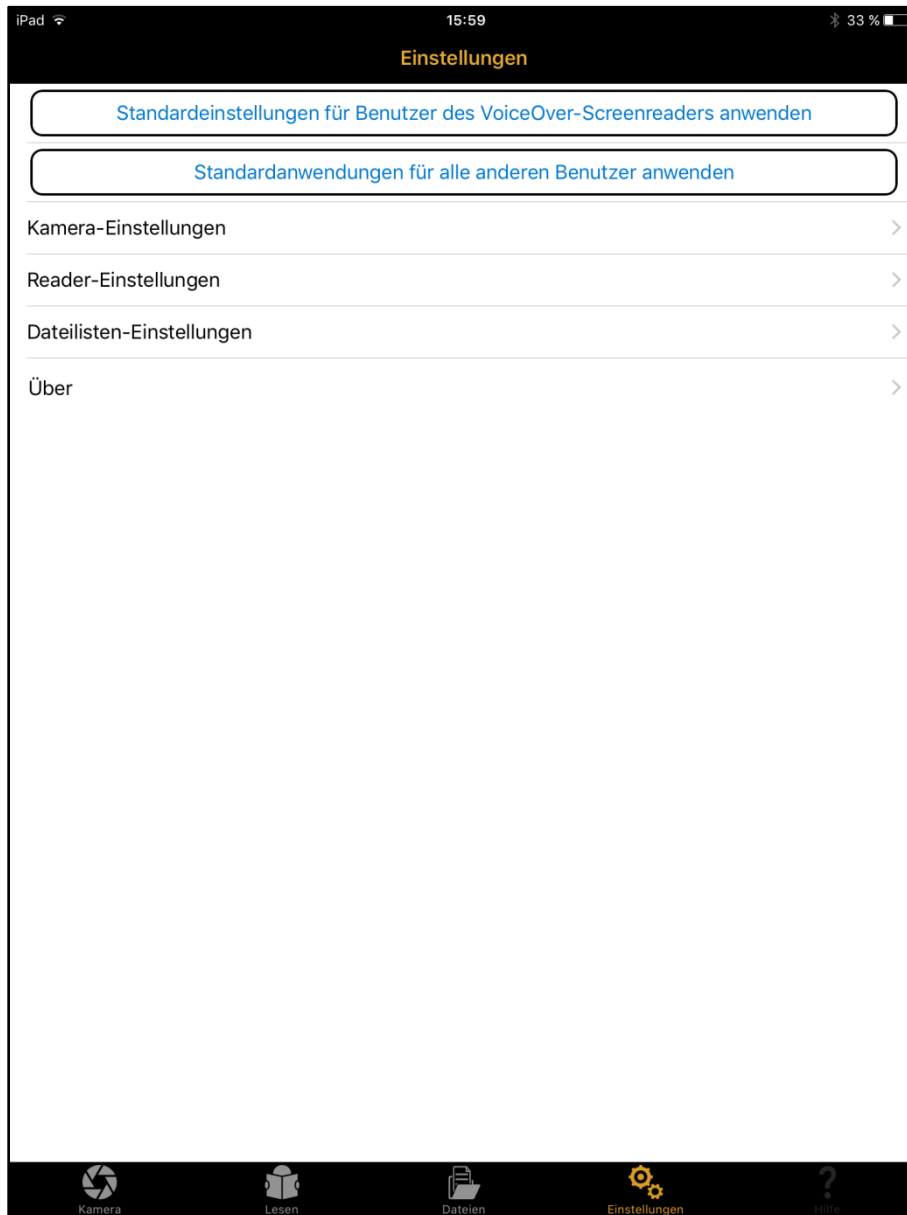

a. Standardeinstellungen

Standardeinstellungen für Benutzer des VoiceOver-Screenreaders anwenden

Standardanwendungen für alle anderen Benutzer anwenden


Über die ersten zwei Optionen des Einstellungsregisters werden viele Optionen des Alineas sofort verändert.

Mit der ersten Option „**Standardeinstellungen für Benutzer des VoiceOver-Screenreaders anwenden**“ wird Ihr Alinea mit dem von vielen VoiceOver-Benutzern verwendeten Erscheinungsbild und Einstellungen konfiguriert. Das Zuschneidewerkzeug ist versteckt, während der Text im traditionellen Textanzeigestil angezeigt wird. Diese Option wird für sehbehinderte Personen empfohlen.

Mit der zweiten Option „**Standardeinstellungen für alle anderen Benutzer anwenden**“ wird die App so konfiguriert, dass sie den Ansprüchen derjenigen Benutzer eher nachkommt, die eine hochgradig visuelle Erfahrung erreichen möchten. Beispielsweise verschwinden der Sichtfeld-Bericht und die Tilt-Kontrolle aus dem Kamera-Register und die Bildansicht wird im Lese-Register verwendet. Erkannte Bilder werden automatisch als PDF gespeichert. Diese Funktionseinstellung ist womöglich eher für Personen mit Lernschwächen oder für Lerner von Fremdsprachen geeignet.

Beim Tippen auf die Taste zum Auswählen einer der Optionen wird ein Überblick über die betroffenen Einstellungen angezeigt. Alle mit diesen beiden Optionen geänderten Einstellungen können auch einzeln konfiguriert werden, um sich Ihren spezifischen Bedürfnissen anzupassen.

b. Kamera-Einstellungen

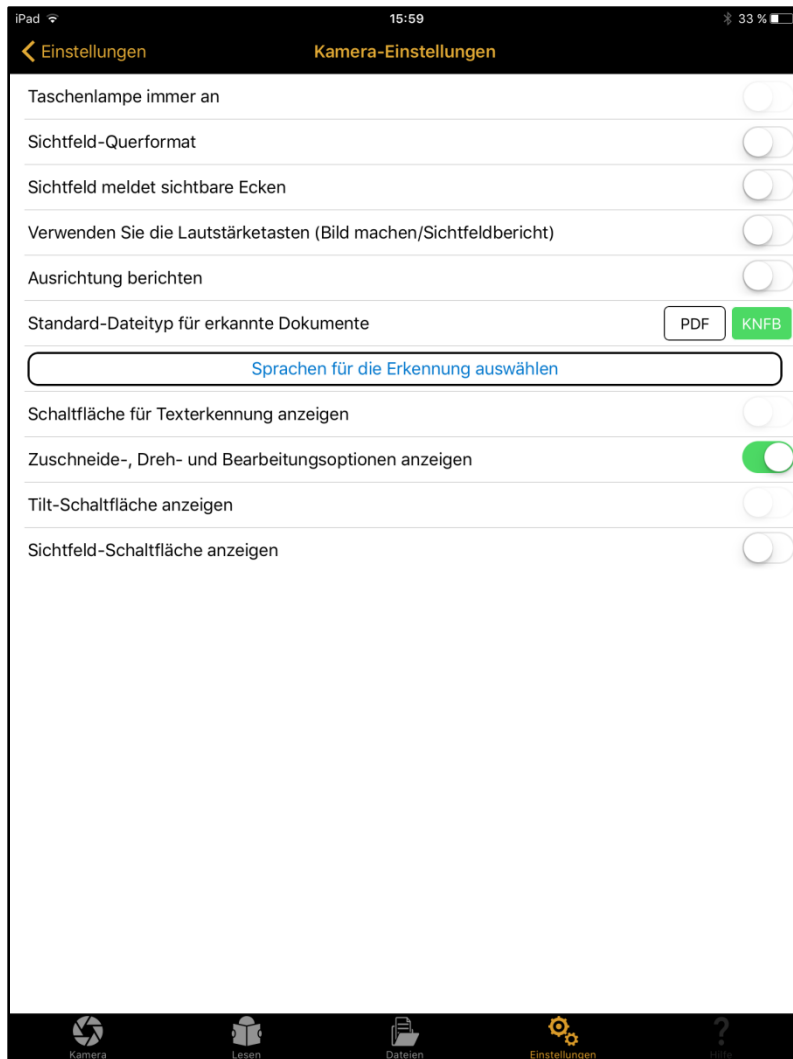

Taschenlampe immer an: Diese Funktion ist standardmäßig immer auf AUS gestellt; wenn sie auf EIN gestellt ist, bleibt die Kameralampe aktiv, wenn Sie sich im Kamera-Register befinden.

Sichtfeld-Querformat: Meldet richtig an den Seitenanfang, wenn das Gerät im Querformat verwendet wird und bringt die Kamera in die obere rechte Ecke.

Sichtfeld meldet sichtbare Ecken: Meldet Eckinformationen zusätzlich zu den Randinformationen, was bei der Konfiguration für die Verwendung mit einem Dokumenten-Scanstand sehr nützlich ist.

Verwenden Sie die Lautstärketasten: Sie können die Lautstärketasten verwenden, um ein Foto aufzunehmen.

Ausrichtung berichten: Das Gerät informiert Sie nach der Aufnahme über die falsche Position des Bildschirms.

Standard-Dateityp für erkannte Dokumente: Dies bestimmt, wie Text angezeigt und gespeichert wird. Wechseln Sie zwischen der PDF-Ansicht und Text-Ansicht als Standard-Dateityp. Text-Ansicht ist

für VoiceOver-Benutzer standardmäßig eingestellt. Wenn auf PDF-Ansicht eingestellt, wird nach der Erkennung eine PDF-Ansicht mit doppelter Hervorhebung angezeigt und standardmäßig als PDF gespeichert.

Sprachen für die Erkennung auswählen: Wählen Sie unter den 33 verfügbaren Erkennungssprachen eine Gruppe an häufig verwendeten Sprachen nach Ihren Vorlieben aus. Diese Sprachen sind dann in der Spracherkennungsliste des Kamera-Registers verfügbar.


Schaltfläche für Texterkennung anzeigen: Anzeigen oder Verbergen der Erkennungstaste im Kamera-Register. Verborgen, wenn die Standardeinstellungen für VoiceOver-Benutzer aktiviert sind.

Zuschneide-, Dreh- und Bearbeitungsoptionen: Anzeigen oder Verbergen der Taste zum Zuschneiden, Drehen und Bearbeiten im Kamera-Register.

Tilt-Schaltfläche anzeigen (geräteabhängig): Anzeigen oder Verbergen der Tilt-Kontrolle im Kamera-Register.

Sichtfeld-Schaltfläche anzeigen: Anzeigen oder Verbergen des Sichtfeld-Berichts im Kamera-Register.

c. Reader-Einstellungen

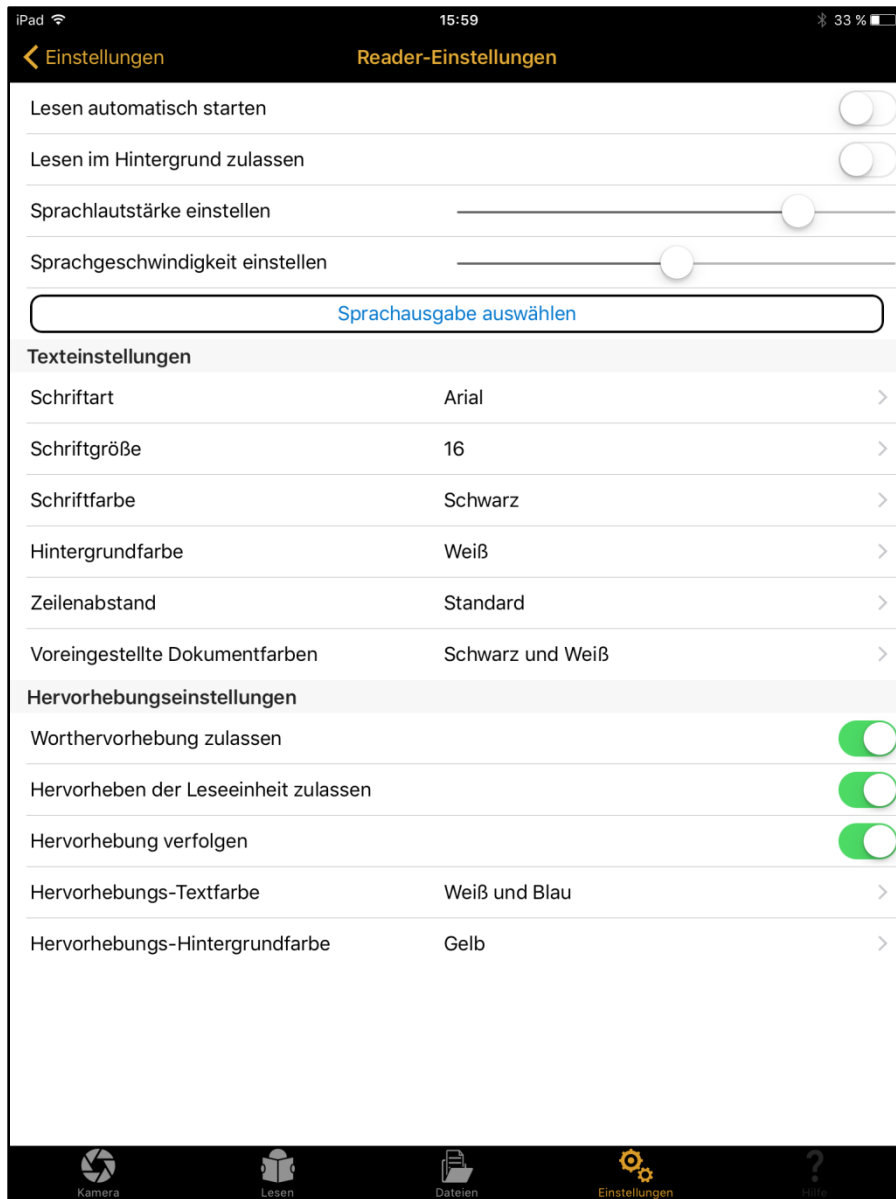

Lesen automatisch starten: Auf AUS stellen, wenn Sie nicht möchten, dass das Lesen automatisch startet.

Lesen im Hintergrund zulassen: Aktivieren, um zuzulassen, das weitergelesen wird, auch wenn das Gerät gesperrt ist, ähnlich wie beim Abspielen von Musik oder dem Anhören eines Hörbuchs.

Sprachlautstärke einstellen: Standardlautstärke der Sprechstimme einstellen.


Sprachgeschwindigkeit einstellen: Standardgeschwindigkeit der Sprechstimme einstellen.

Sprachausgabe auswählen: Wählen Sie aus der auf dem Gerät installierten Liste eine Untergruppe an Lesestimmen aus und lassen Sie nur diese als Option im Lesesprache-Picker des Lese-Registers erscheinen.

Texteinstellungen für Text-Dateien: Ändern Sie die Schrift (Art, Größe, Farbe) sowie die Hintergrundfarbe, Zeilenabstand und Dokumentfarben je nach Ihren Vorlieben.

Hervorhebungseinstellungen: Legen Sie den Stil und die Farbe der verschiedenen verfügbaren Hervorhebungsformen fest; auf Wort- und Einheitsebene (z.B. Satz) oder für den Hintergrund (Hervorhebungs-Textfarbe ist nur im Text-Format verfügbar).

d. Dateilisten-Einstellungen

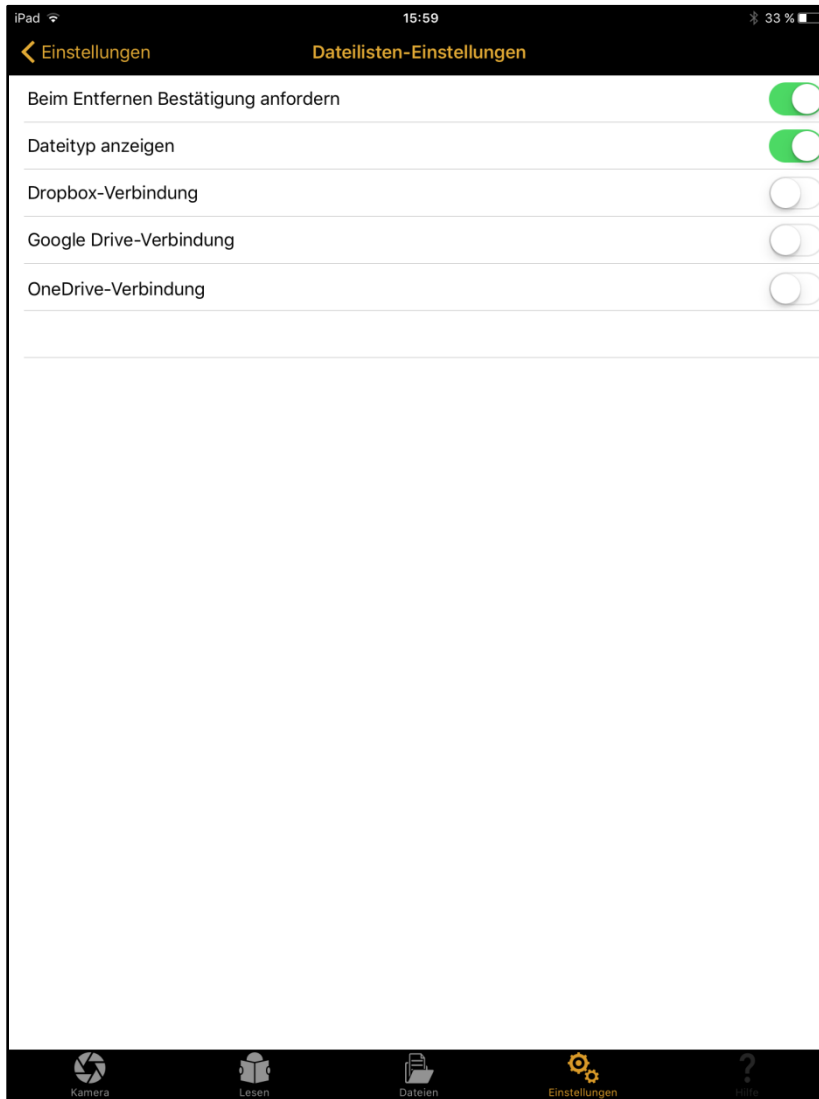


Es gibt 5 mögliche Dateieinstellungen:

1. **Bestätigungsabfrage** vor dem Löschen eines Dokuments oder Ordners.
2. **Dateityp anzeigen:** Anzeige des Dateiformats jedes Dokuments in der Ordnerstruktur.
3. **Dropbox-Verbindung:** Auf EIN stellen, wenn Dropbox Ihr bevorzugter Cloud-Dienst ist.
4. **Google Drive-Verbindung:** Auf EIN stellen, wenn Google Drive Ihr bevorzugter Cloud-Dienst ist.
5. **One Drive-Verbindung:** Auf EIN stellen, wenn One Drive Ihr bevorzugter Cloud-Dienst ist.

Bitte beachten Sie: Derzeit können Sie nur eine dieser Optionen auswählen.

e. Über

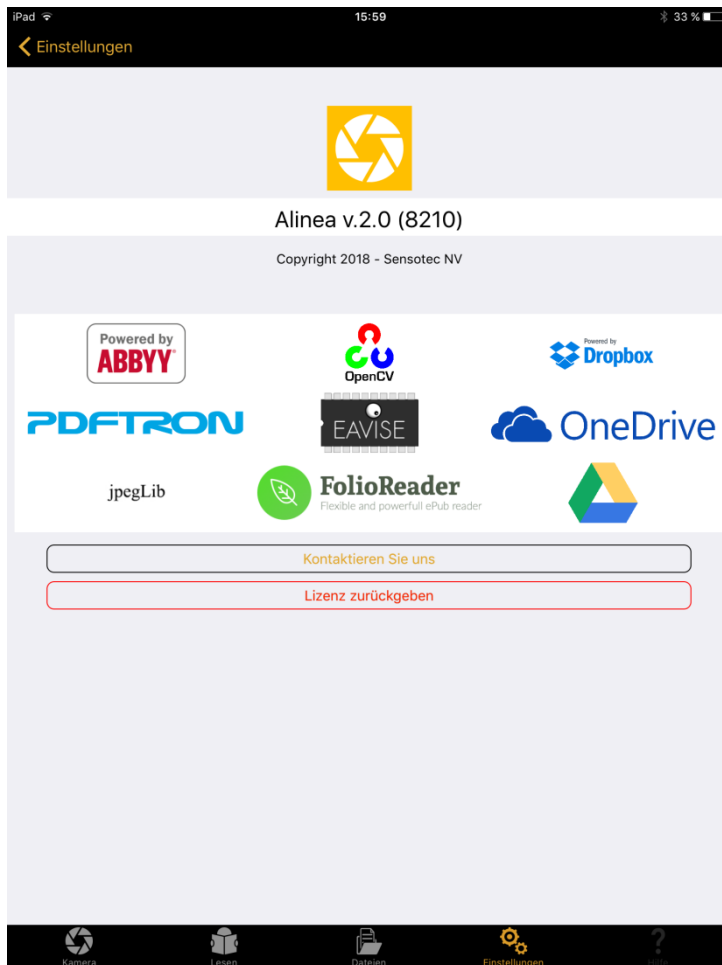

Dieser Abschnitt enthält Versionsinformationen der Alinea-App sowie andere legale und regulatorische Informationen.


Kontaktieren Sie uns: Sie finden hier unsere Kontaktdaten, um eine E-Mail an unseren Support-Service zu senden.

Lizenz zurückgeben: Die Lizenz kann mit maximal 2 Geräten und 1 Cloud-Dienst (entweder Ihrer Dropbox, Ihrem GoogleDrive oder Ihrem OneDrive) verknüpft werden.

Wenn Sie die App auf einem dritten Gerät verwenden möchten, müssen Sie Ihre Lizenz (Token) vorübergehend an unseren Lizenzserver zurückgeben.

5. Als fünften und letzten der 5 Hauptregisterkarten sehen wir uns das HILFE-Register näher an. Dank dieses Hilfe-Registers kommen Sie bei Problemen immer weiter.

?

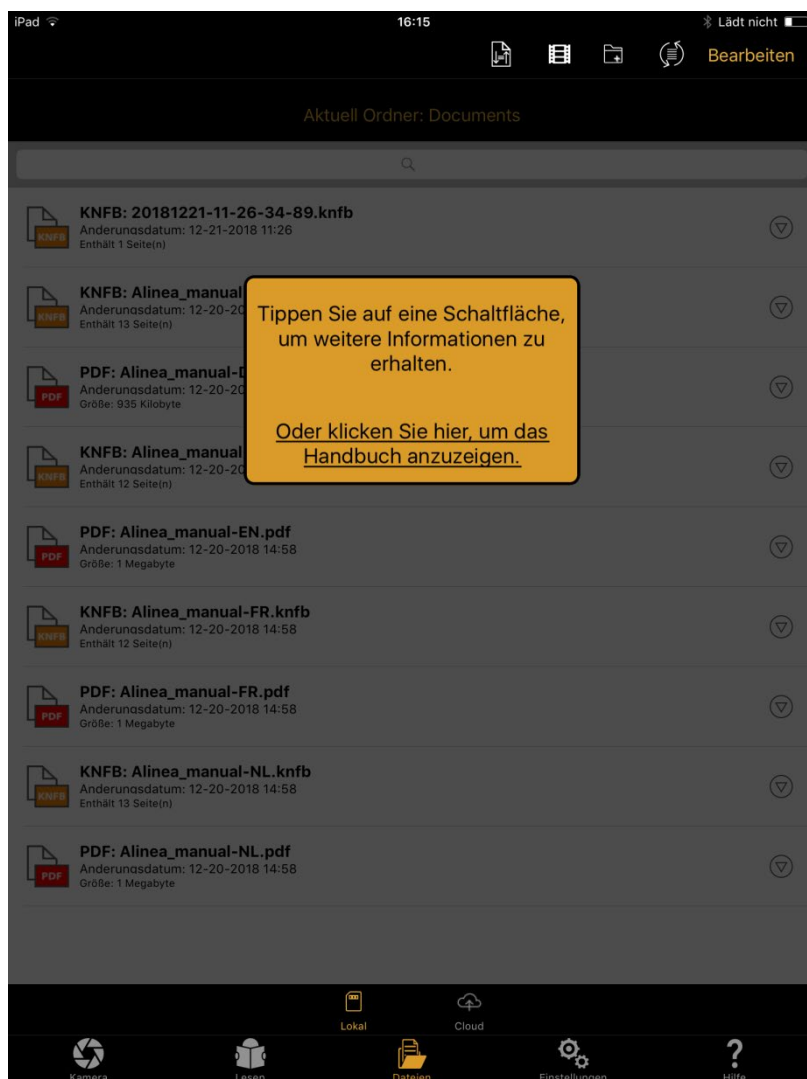

Klicken Sie auf ? Hilfe und dann auf die Schaltfläche, für die Sie eine Erklärung wünschen, oder klicken Sie auf den Link, um das Handbuch zu öffnen.
Wenn VoiceOver aktiviert ist, wird den Leitfaden sofort geöffnet.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns:

Sensotec nv: info@sensotec.be , www.sensotec.be

Letztes Kapitel: interessante Zusatzinformationen

a. Alinea hat Schwierigkeiten mit den folgenden Funktionen oder unterstützt sie gar nicht:

1. Handschrift und Text, der über den Bildschirm rollt.
2. Die Alinea-App übersetzt oder verändert die erkannte Sprache nicht. Die App kann jedoch in den unterstützten erkannten Sprachen vorlesen. Es sind 14 Sprachen verfügbar.
3. Text auf dreidimensionalen Produkten mit Volumen, insbesondere in Kombination mit vielen Bildern.
4. Bilder, die von LED- und LCD-Bildschirmen, wie etwa Computern, Uhren, Automaten, ... aufgenommen wurden.
5. Gravuren.

b. Die Genauigkeit der Alinea-App kann variieren.

Folgende Faktoren können die Genauigkeit der Alinea-App beeinflussen: Oberflächenspiegelung, Abstand zwischen Kamera und Zielobjekt, textverbundene Elemente wie Größe, Layout, Wölbung, Knitter oder Falten, Hintergrundbilder- und -farben, Lichtverhältnisse, Schatten, Hindernisse.